

Predictor

Fiable à 99%*
99% betrouwbaar*
99% genau*

*Basé sur des tests laboratoires
*Gebaseerd op laboratorium testen
*Gegründet auf Laborversuchen

TEST PRÉCOCE DE GROSSESSE • VROEGTIJDIGE ZWANGERSCHAPSTEST • SCHWANGERSCHAFTS FRÜHTEST

Le test précoce de grossesse Predictor est un test à effectuer soi-même. Veuillez lire attentivement toutes les informations avant de l'utiliser. N'ouvrez pas le sachet avant d'être prête à effectuer le test. Veuillez à avoir une montre, une horloge ou une minuterie à votre disposition.

Lorsqu'une femme tombe enceinte, son corps produit une hormone appelée hCG (human Chorionic Gonadotropin). La sécrétion de cette hormone par le placenta en train de se développer, commence très vite après la conception et augmente rapidement au cours du premier trimestre.

Le taux d'hCG d'une femme non enceinte, en bonne santé, s'élève de 0 à 5 IU/l (unités internationales par litre). Au début de la grossesse, les taux d'hCG augmentent dès les premiers jours suivant la conception. C'est pourquoi l'hCG convient très bien au diagnostic de la grossesse. La valeur limite, qui présuppose une grossesse, se situe à 10 IU/l.

Ce test précoce de grossesse Predictor vous indique que vous êtes enceinte dès qu'une concentration d'hCG d'au moins 12,5 IU/l est présente dans votre urine, et il convient donc pour une utilisation à partir de 10 jours après la conception, c'est-à-dire dès 4 jours avant la date présomée de vos règles.

De Predictor vroegtijdige zwangerschapstest is een door u zelf uit te voeren test. Lees deze bijsluiter aandachtig voordat u de test uitvoert.

Open de folie pas als u de test wilt uitvoeren. Neem een horloge, klokje of timer bij de hand.

Als een vrouw zwanger wordt, produceert haar lichaam het hCG-hormoon (human Chorionic Gonadotropin). De secretie van dit hormoon door de groeiende baarmoeder begint kort na de conceptie en neemt snel toe tijdens het eerste trimester.

Het hCG-niveau van een gezonde vrouw die niet zwanger is, varieert tussen 0 en 5 IU/l (internationale eenheden per liter). Bij een zwangerschap neemt de hCG-concentratie al in de eerste dagen na de bevruchting toe. Daarom is hCG een goede indicator om een zwangerschap vast te stellen. Het drempelniveau voor het bevestigen van een zwangerschap ligt op 10 IU/l.


De Predictor vroegtijdige zwangerschapstest zal hCG-concentraties vanaf 12,5 IU/l en hoger in de urine waarnemen en is daarom een geschikt testmiddel om een zwangerschap te bepalen vanaf 10 dagen na de conceptie, en dus vanaf 4 dagen voordat de menstruatie moet beginnen.

Der Predictor Schwangerschafts Frühtest ist ein Selbsttest. Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Öffnen Sie die Folienverpackung erst, wenn Sie den Test durchführen möchten. Bitte halten Sie eine Uhr, einen Wecker oder einen Zeitmesser bereit.

Wenn eine Frau schwanger wird, produziert ihr Körper ein Hormon mit dem Namen hCG (humanes Choriongonadotropin). Die Ausscheidung dieses Hormons durch die sich entwickelnde Plazenta beginnt bald nach der Befruchtung und erhöht sich schnell während der ersten drei Monate.

Das hCG-Niveau von gesunden, nicht schwangeren Frauen liegt zwischen 0 und 5 IU/L (internationale Einheiten pro Liter). Bei Beginn der Schwangerschaft erhöht sich die hCG-Konzentration gleich ab den ersten Tagen nach der Befruchtung. Aus diesem Grund ist hCG ein sehr guter Indikator für die Schwangerschaftsdiagnose. Der Grenzwert für die Bestätigung einer Schwangerschaft liegt bei 10 IU/l.

Der Predictor Schwangerschafts Frühtest stellt hCG-Konzentrationen von 12,5 IU/L und mehr im Urin fest und eignet sich deshalb zur Anzeige von Schwangerschaften 10 Tage nach der Befruchtung, d. h. 4 Tage vor dem Fälligkeitsdatum der Menstruation.

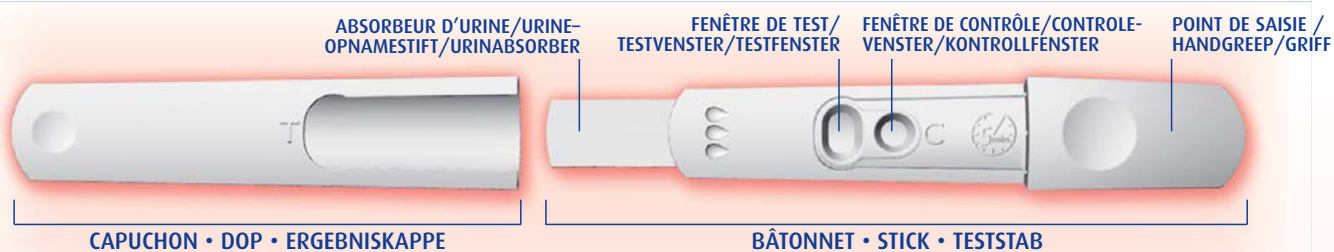

COMMENT RÉALISER LE TEST?

Predictor peut s'utiliser à tout moment de la journée.

HOE DE TEST UITVOEREN?


De Predictor vroegtijdige zwangerschapstest kan op elk ogenblik van de dag gebruikt worden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Der Predictor Schwangerschafts Frühtest kann zu jeder Tageszeit gemacht werden.

- Sortez le test de grossesse du sachet métallisé. Ouvrez le test en retirant le capuchon du bâtonnet.
- Tenez la poignée du test de telle manière que l'absorbant d'urine soit orienté vers le bas.
- Urinez directement sur l'absorbant pendant au moins 5 secondes. **Note:** l'absorbant d'urine doit être complètement mouillé.
- Après au moins 5 secondes, lorsque l'absorbant est mouillé, enlevez le test du jet d'urine et remplacez le capuchon de protection sur l'extrémité de l'absorbant humide.
- A ce moment-là, ne retournez pas le bâtonnet de test, laissez-le orienté vers le bas.
- Placez le bâtonnet de test sur une surface plate avec les deux fenêtres de contrôle tournées vers le haut.
- Attendez 5 minutes avant de lire le résultat.

Note: vous pouvez aussi collecter l'échantillon d'urine dans un récipient pour effectuer le test (voir section sur les questions courantes).

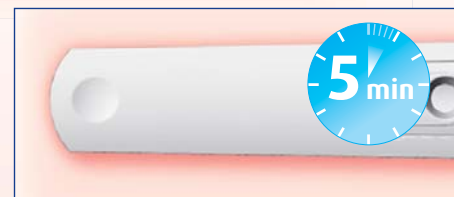

- Neem de zwangerschapstest uit de folieverpakking. Open de test door de dop van de stick te verwijderen.
- Houd de handgreep van de test zo vast dat de urineopnamestift naar beneden is gericht.
- Urineer gedurende ten minste 5 seconden rechtstreeks op de urineopnamestift. **Opmerking:** de urineopnamestift moet volledig nat zijn.
- Verwijder, na ten minste 5 seconden, als de urineopnamestift nat is, de test van onder de urinestraal en plaats het beschermingsdopje over het uiteinde van de natte opnamestift.
- Keer de stick niet om, maar houd hem naar beneden gericht.
- Plaats de teststick op een vlak oppervlak met de vensters naar boven gericht.
- Wacht 5 minuten voor u het resultaat afleest.

Opmerking: u kunt ook urine verzamelen in een testpotje (raadpleeg het onderdeel 'veel voorkomende vragen').

- Nehmen Sie den Schwangerschaftstest aus der Folienverpackung. Öffnen Sie den Test, indem Sie die Kappe des Teststäbchens entfernen.
- Halten Sie den Griff des Teststäbchens so, dass der Urinabsorbier nach unten weist.
- Urinieren Sie mindestens 5 Sekunden lang direkt auf den Absorbier. **Hinweis:** Der Urinabsorbier muss vollständig befeuchtet sein.
- Nach mindestens 5 Sekunden, wenn der Absorbier befeuchtet ist, nehmen Sie den Test aus dem Urinstrahl und setzen die Schutzkappe wieder auf das feuchte Ende des Absorbierers.
- An diesem Punkt das Teststäbchen nicht umdrehen, halten Sie es weiterhin so, dass es nach unten weist.
- Legen Sie das Teststäbchen auf eine flache Oberfläche, sodass die beiden Sichtfenster nach oben zeigen.
- Warten Sie 5 Minuten, bevor Sie das Resultat ablesen.

Hinweis: Als Alternative können Sie den Urin zum Testen auch in einem Probefecher sammeln (siehe den Abschnitt bei den häufig gestellten Fragen).

COMMENT LIRE LES RÉSULTATS? HOE HET RESULTAAT LEZEN? ABLESEN DER RESULTATE



OUI • JA • JA
Enceinte
Zwanger
Schwanger



NON • NEEN • NEIN
Pas enceinte
Niet zwanger
Nicht schwanger

Après avoir réalisé le test, que vous soyez enceinte ou non, une ligne rose/pourpre apparaîtra dans la fenêtre ronde de contrôle. Elle indique le bon fonctionnement du test. Lisez le résultat 5 minutes après avoir réalisé le test. N'interprétez pas le résultat après 30 minutes.

OUI Enceinte! Vous pouvez conclure que vous êtes enceinte si une ligne rose/pourpre apparaît dans la grande fenêtre ovale du test (T). Même si la ligne est très pâle, elle signifie pourtant que vous êtes enceinte. Un résultat positif peut se voir, dans certains cas, en moins d'1 minute.

NON Pas enceinte! Vous pouvez conclure que vous n'êtes pas enceinte s'il n'y a pas de ligne rose/pourpre dans la grande fenêtre de test ovale (T).

Nadat u de test gedaan hebt, zal er een roze/paarse lijn in het ronde controlevenster verschijnen, of u nu zwanger bent of niet. Dat betekent dat de test correct verloopt. U kunt het resultaat na 5 minuten aflezen. Wacht geen 30 minuten om het resultaat af te lezen.

U bent zwanger als een roze/paarse lijn in het grote ovale testvenster (T) zichtbaar is. Zelfs als de lijn heel licht van kleur is, betekent dit dat u zwanger bent. Een positief resultaat kan in sommige gevallen al na minder dan 1 minuut zichtbaar worden.

U bent niet zwanger als er geen roze/paarse lijn in het grote ovale testvenster (T) zichtbaar is.

Nach dem Durchführen des Tests erscheint eine rosa/violette Linie im runden Kontrollfenster, gleichgültig ob Sie schwanger sind oder nicht. Diese zeigt an, dass der Test richtig funktioniert.

Lesen Sie das Resultat 5 Minuten nach der Durchführung ab. Nach 30 Minuten ist das Resultat nicht mehr gültig.

Sie sind schwanger, wenn im großen ovalen Testfenster (T) eine rosa/violette Linie erscheint. Selbst wenn die Linie sehr blass ist, bedeutet dies dennoch, dass Sie schwanger sind. Ein positives Resultat kann in manchen Fällen in weniger als 1 Minute festgestellt werden.

Sie sind nicht schwanger, wenn im großen ovalen Testfenster (T) keine rosa/violette Linie erscheint.

Important: une ligne de contrôle doit toujours être visible. S'il n'y en a pas, le test n'a pas fonctionné correctement et le résultat du test n'est pas correct. Il se peut que la quantité d'urine sur l'absorbant était insuffisante. Répétez le test avec un nouveau dispositif en suivant soigneusement les instructions.

Belangrijk: er moet altijd een controlelijn zichtbaar zijn. Als er geen controlelijn zichtbaar is, is de test niet goed verlopen en is het resultaat ongetuigd. De urineopnamestift heeft misschien onvoldoende urine opgenomen. Herhaal de test met een nieuwe stick en volg de instructies goed op.

Wichtig: Es sollte immer eine Kontrolllinie sichtbar sein. Erscheint keine Kontrolllinie, hat der Test nicht richtig funktioniert, das Testergebnis ist ungültig. Evtl. war der Absorbier nicht mit genügend Urin befeuchtet. Wiederholen Sie den Test mit einem neuen Testpack und befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen.



RÉSULTAT POSITIF? CONSERVEZ LE TEST!

Un résultat de test positif le reste indéfiniment. Certaines personnes aiment conserver un test positif pour le montrer à leurs proches ou même pour le mettre dans le premier album de bébé. Predictor a amélioré le concept: un clic et la poignée s'enlève. Le test devient ainsi plus compact et plus facile à ranger

QUESTIONS COURANTES CONCERNANT LE TEST DE GROSSESSE PREDICTOR

Quelle est la fiabilité du test précoce de grossesse Predictor? Predictor est aussi fiable qu'un test de grossesse effectué par un médecin.

Comment fonctionne le test précoce de grossesse Predictor? Lorsqu'une femme tombe enceinte, son corps commence à produire une hormone spéciale connue sous le nom de hCG (human Chorionic Gonadotropin), présente dans l'urine et qui augmente chaque jour. Le test précoce de Predictor est exclusivement conçu pour détecter déjà de très petites quantités de cette hormone de grossesse dans votre urine. Vous pouvez dès lors effectuer le test dès le 10ème jour après la conception (4 jours avant la date présumée des règles).

A partir de quand puis-je utiliser le test précoce de grossesse Predictor? Le test précoce de grossesse Predictor est un test extrêmement sensible et il peut détecter de très faibles niveaux d'hCG dans votre urine à partir de 10 jours après la conception (4 jours avant la date présumée des règles). Pendant les premiers jours de la grossesse, le niveau d'hCG dans les urines peut varier d'une femme à l'autre. Si vous vérifiez trop tôt, il se peut que vous soyez enceinte, mais que vous n'avez pas produit suffisamment d'hCG pour que cette dernière soit détectée par le test. Si vous obtenez un résultat négatif et que vous avez néanmoins l'impression que vous pourriez être enceinte, effectuez un nouveau test un jour plus proche de la date présumée de vos règles.

Dois-je effectuer le test le matin? Non, vous pouvez utiliser le test précoce de Predictor à tout moment de la journée. Boire de façon importante immédiatement avant le test peut diluer l'hormone de grossesse, donc buvez normalement avant de le faire.

Après 5 minutes, la fenêtre de test ne présentait pas de ligne, mais quelques minutes plus tard, elle est apparue. Si la ligne apparaît dans la fenêtre de test dans les 30 minutes qui suivent, le résultat est positif, même si la ligne est relativement pâle.

Combien de temps mon résultat restera-t-il visible avant de disparaître ou de changer? Un résultat positif ne changera pas, même si le fond devient plus sombre. Vous pouvez conserver le test à résultat positif. Lorsque le résultat est négatif, une ligne très faible peut apparaître dans la fenêtre de test après plus de 30 minutes. Ce dépôt coloré, apparaissant après 30 minutes, n'indique pas un résultat positif. Rappelez-vous: n'interprétez pas le résultat après 30 minutes.

Puis-je aussi utiliser le test si j'ai mis un échantillon d'urine dans un récipient? Oui, dans la mesure où l'échantillon d'urine se trouve dans un récipient propre et sec. N'utilisez pas de détergent ou de solvant pour le nettoyer. Effectuez le test directement: plongez l'absorbant d'urine dans celle-ci durant 10 secondes au moins. Veillez à ce que le niveau d'urine ne dépasse pas le bout en plastique du bâtonnet. Attendez cinq minutes avant de lire le résultat.

Qu'est-ce que je fais si j'obtiens un résultat positif? Si le test est positif, nous vous recommandons de consulter un médecin afin de discuter de votre grossesse ainsi que des étapes et précautions à prendre par la suite. Les soins prénatals précoces sont très importants pour votre santé de même que pour celle de votre bébé.

Le résultat du test dit que je ne suis pas enceinte, mais je n'en suis pas certaine. Si le résultat dit que vous n'êtes pas enceinte, aucune hormone de grossesse (human Chorionic Gonadotropin) n'a été détectée. Il se peut que vous vous soyez trompée quant au jour de début de vos règles. Si vos règles n'ont pas débuté dans une semaine, répétez le test en utilisant un autre test à domicile de grossesse Predictor. Si le résultat est encore négatif et que vous n'avez pas encore vos règles, consultez votre médecin.

Certains médicaments peuvent-ils influencer sur le résultat du test? Predictor est uniquement affecté par les médicaments contre la stérilité qui contiennent de l'hCG (human Chorionic Gonadotropin) ou de l'hMG (human Chorionic Gonadotropin). Les autres médicaments contre la stérilité (notamment le Clomid), les antibiotiques, les analgésiques ou la pilule contraceptive ne devraient pas avoir d'influence sur le résultat.

Puis-je utiliser le test précoce de grossesse Predictor plusieurs fois? Non, chaque test ne peut être utilisé qu'une seule fois.

POSITIF RESULTAAT? BEWAAR DE TEST!

En positif resultaat blijft positief. Sommige mensen tonen de positieve test graag aan hun naasten of bewaren de test in het eerste album van de baby. Predictor heeft zijn ontwerp aangepast: één klik en de handgreep is verwijderd. Zo is de test compacter en gemakkelijker op te bergen.



VEEL VOORKOMENDE VRAGEN OVER DE PREDICTOR VROEGTIJDIGE ZWANGERSCHAPSTEST

Hoe betrouwbaar is de Predictor vroegtijdige zwangerschapstest? Predictor is even betrouwbaar als een zwangerschapstest die door een arts wordt uitgevoerd.

Hoe werkt de Predictor vroegtijdige zwangerschapstest? Als een vrouw zwanger wordt, begint haar lichaam een speciaal hormoon, hCG (human Chorionic Gonadotropin) te produceren, dat aanwezig is in de urine en dagelijks toeneemt. Predictor vroegtijdige zwangerschapstest is ontworpen om zeer kleine hoeveelheden van dit zwangerschapshormoon in uw urine op te sporen. Vanaf 10 dagen na de conceptie (4 dagen voor uw menstruatie moet beginnen) kunt u de test doen.

Vanaf wanneer kan ik de Predictor vroegtijdige zwangerschapstest gebruiken? De Predictor vroegtijdige zwangerschapstest is een uiterst gevoelige test en kan zeer lage hoeveelheden hCG in de urine opsporen: vanaf 10 dagen na de conceptie (4 dagen voor de menstruatie begint). Tijdens de eerste dagen van de zwangerschap kan de hoeveelheid hCG variëren van vrouw tot vrouw. Als u de test te vroeg doet, is er een kans dat u zwanger bent, maar dat er nog niet voldoende hCG aanwezig is waardoor de test het hormoon niet kan opsporen. Als u een negatief resultaat hebt en nog steeds het gevoel hebt dat u misschien zwanger bent, kunt u de test opnieuw uitvoeren op een datum dichtbij het begin van uw menstruatie.

Moet ik de test 's morgens uitvoeren? Nee, u kunt met de Predictor vroegtijdige zwangerschapstest op elk moment van de dag testen. Als u te veel drinkt onmiddellijk voordat u de test uitvoert, kan dit het zwangerschapshormoon verdunnen, dus drink normale hoeveelheden voor de test.

Na 5 minuten was er geen lijn in het testenvenster zichtbaar, maar enkele minuten later wel. Als de lijn zichtbaar wordt binnen de 30 minuten is het resultaat positief, ongeacht hoe licht de kleur van de lijn is.

Hoe lang blijft het resultaat zichtbaar voordat het verdwijnt of verandert? Een positief resultaat verandert niet, alleen de achtergrond kan iets donkerder worden. U kunt de test met het positieve resultaat bewaren. Toch kan er bij een negatief resultaat, na 30 minuten een hele licht lijn in het testenvenster verschijnen. Dit duidt niet op een positief resultaat. Vergeet niet dat u het resultaat binnen de 30 minuten moet aflezen.

Kan ik de test gebruiken als ik een urinestaal in een potje verzameld heb? Ja, zolang het urinestaal in een proper en droog potje opgevangen wordt. Gebruik geen schoonmaak- of oplosmiddel om het te reinigen. Voer de test onmiddellijk uit: stop de urineopnamestijf ten minste 10 seconden in de urine. Zorg ervoor dat het urinepeil niet boven het plastic omhulsel van de stick komt. Wacht 5 minuten voor u het resultaat afleest.

Wat moet ik doen als het resultaat positief is? Als het resultaat van de test positief is, raden we u aan een arts te raadplegen om uw zwangerschap, de volgende stappen en de voorzorgsmaatregelen die u moet nemen, te bespreken. Vroegtijdige prenatale begeleiding is heel belangrijk voor uw gezondheid en die van uw baby.

Het resultaat is negatief, maar ik twijfel nog. Als het resultaat negatief is, betekent dit dat de test geen zwangerschapshormoon (human Chorionic Gonadotropin) heeft waargenomen. Misschien hebt u een vergissing gemaakt bij het berekenen van de dag waarop uw menstruatie zou moeten beginnen. Als uw menstruatie in de daaropvolgende week niet doorkomt, raden wij u aan om de test opnieuw uit te voeren met een andere Predictor zwangerschapstest. Als het resultaat nog steeds negatief is en u menstrueert nog steeds niet, raadpleeg dan een arts.

Kunnen geneesmiddelen het resultaat beïnvloeden? Het resultaat van Predictor kan alleen beïnvloed worden door geneesmiddelen voor de behandeling van onvruchtbaarheid die hCG (human Chorionic Gonadotropin) of hMG (human Menopausal Gonadotropin) bevatten. Andere geneesmiddelen voor de behandeling van onvruchtbaarheid (zoals Clomid), antibiotica, pijnstillers of de anticonceptiepill hebben geen invloed op het resultaat.

Kan ik de Predictor vroegtijdige zwangerschapstest meerdere malen gebruiken? Nee, u kunt elke test maar één keer gebruiken.

POSITIVES RESULTAT? BEWAHREN SIE DEN TEST AUF!

Ein positives Testresultat bleibt unverändert, und manche Leute behalten das Teststäbchen, um es Familie und Freunden zu zeigen oder in das Babyalbum zu kleben. Predictor hat das Design optimiert: der Griff kann mit einem Klick entfernt werden und das kompakte Teststäbchen kann einfach aufbewahrt werden.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZUM PREDICTOR SCHWANGERSCHAFTS FRÜHTEST

Wie exakt ist der Predictor Schwangerschafts Frühtest? Predictor ist genau so zuverlässig wie ein vom Arzt durchgeführter Schwangerschaftstest.

Wie funktioniert der Predictor Schwangerschafts Frühtest? Wenn eine Frau schwanger wird, beginnt ihr Körper ein spezifisches, als hCG (humanes Choriongonadotropin) bekanntes Hormon zu produzieren, das im Urin vorhanden ist und dessen Konzentration täglich steigt. Predictor Schwangerschafts Frühtest ist dafür konzipiert, sehr kleine Mengen dieses Schwangerschaftshormons in Ihrem Urin festzustellen, sodass Sie den Test schon 10 Tage nach der Befruchtung durchführen können (4 Tage, bevor Sie Ihre Menstruation erwarten).

Wie früh kann ich den Predictor Schwangerschafts-Frühtest anwenden? Der Predictor Schwangerschafts-Frühtest ist ein extrem empfindlicher Test und kann schon 10 Tage nach der Befruchtung durchgeführt werden (4 Tage, bevor Sie Ihre Menstruation erwarten), da er schon sehr geringe Konzentrationen von hCG im Urin feststellt. Während der ersten Tage einer Schwangerschaft kann das hCG-Niveau im Urin von Frau zu Frau unterschiedlich sein. Bei einem zu früh durchgeführten Test könnten Sie zwar schwanger sein, aber es könnte noch nicht genug hCG vorhanden sein, um festgestellt zu werden. Wenn Sie ein negatives Resultat erhalten und immer noch meinen, dass Sie schwanger sein könnten, testen Sie kurz vor dem Fälligkeitstag Ihrer Menstruation noch einmal.

Muss ich den Test morgens durchführen? Nein, Sie können den Predictor Schwangerschafts Frühtest zu jeder Tageszeit durchführen. Eine übermäßige Flüssigkeitsaufnahme vor dem Testen könnte das Schwangerschaftshormon verdünnen, trinken Sie also ganz normal, bevor Sie testen.

Nach 5 Minuten ist im Ergebnisfenster noch keine Linie zu sehen, diese erscheint jedoch einige Minuten später. Wenn die Linie innerhalb einer Zeitspanne von 30 Minuten erscheint, ist das Resultat positiv, gleichgültig wie schwach die Linie ist.

Wie lange ist mein Resultat zu sehen, bevor es verblasst oder sich ändert? Ein positives Resultat bleibt unverändert, der Hintergrund könnte allerdings etwas dunkler werden. Positive Resultate können aufbewahrt werden. Bei einem negativen Resultat könnte im Testfenster nach mehr als 30 Minuten eine sehr blasser Linie erscheinen. Diese zeigt kein positives Resultat an. Bedenken Sie, dass Sie das Resultat nach 30 Minuten nicht mehr auswerten können.

Kann ich den Test noch verwenden, wenn ich meine Urinprobe in einem Sammelbecher gesammelt habe? Ja, solange sich die Urinprobe in einem sauberen, trockenen Behälter befindet. Benutzen Sie für die Reinigung kein Reinigungs- oder Lösungsmittel. Machen Sie den Test sofort: Tauchen Sie den Urinabsorbierender mindestens 10 Sekunden lang in den Urin. Achten Sie darauf, dass der Urinpegel nicht über das Plastikgehäuse des Stäbchens steigt. Warten Sie fünf Minuten, bevor Sie das Ergebnis ablesen.

Was tue ich bei einem positiven Resultat? Wenn der Test positiv ist, raten wir Ihnen, einen Arzt zu konsultieren, um Ihre Schwangerschaft und die weiteren Schritte und Sicherheitsmaßnahmen zu besprechen. Eine frühe pränatale Pflege ist sehr wichtig, um sowohl Ihre Gesundheit als auch die Ihres Kindes zu gewährleisten.

Das Testergebnis besagt, dass ich nicht schwanger bin, aber ich bin mir immer noch nicht sicher. Wenn das Testergebnis besagt, dass Sie nicht schwanger sind, wurde kein Schwangerschaftshormon (humanes Choriongonadotropin) festgestellt. Vielleicht haben Sie den Fälligkeitstag Ihrer Menstruation falsch berechnet. Wenn Ihre Menstruation nicht innerhalb einer Woche beginnt, wiederholen Sie den Test mithilfe eines anderen Predictor Schwangerschaftstests. Ist das Resultat immer noch negativ, und Ihre Menstruation hat noch nicht begonnen, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.

Können irgendwelche Arzneimittel das Resultat beeinflussen? Predictor wird nur von Fruchtbarkeitsmedikamenten beeinflusst, die hCG (humanes Choriongonadotropin) oder hMG (humanes Menopausengonadotropin) enthalten. Andere Fruchtbarkeitsmedikamente (wie z. B. Clomid), Antibiotika, Schmerzmittel oder die Antibabypille sollten das Ergebnis nicht beeinflussen.

Kann ich den Predictor Schwangerschafts Frühtest mehr als einmal benutzen? Nein, Sie können jeden Test nur einmal benutzen.

D'AUTRES QUESTIONS?

Visitez notre site web: www.predictor.be
ou ☎ 078/15 90 09 (Tarif régional)
7 jours sur 7, 24h/24h, conseillères spécialisées

NOG VRAGEN?

Bezoek onze website: www.predictor.be
of ☎ 078/15 90 09 (Zonaal tarief)
7 dagen op 7, 24u/24u, gespecialiseerde medewerkers

NOCH WEITERE FRAGEN?

Besuchen Sie unsere Website: www.predictor.be
oder ☎ 078/15 90 09 (Regionaltarif)
7 auf sur 7, rund um die Uhr, Persönliche Beratung

Composition: bâtonnet de test contenant une membrane gainée d'anticorps monoclonaux et polyclonaux ainsi qu'une pastille contenant de l'IgG monoclonal (anticorps) associé à un colorant dans une matrice protéinique.

Conserver à température ambiante (15 °C – 28 °C) dans un sachet fermé. Si le sachet est endommagé, ne pas utiliser le test. Bewaren bij kamertemperatuur (15 °C – 28 °C) in een gesloten verpakking. Gebruik de test niet meer als de folie beschadigd is. Bei Zimmertemperatur (15 °C – 28 °C) in der versiegelten Folienverpackung aufbewahren. Bei einer beschädigten Folie, den Test nicht benutzen.

Tenir hors de portée des enfants. Buiten het bereik van kinderen houden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

② Usage unique - À utiliser une seule fois. Gebruik iedere test maar 1 keer. Einmalige Verwendung – nicht wiederverwenden.

Pas encore enceinte, mais envie de l'être? Le test Predictor Ovation indique les 2 jours les plus fertiles de votre cycle. Nog niet zwanger, maar u zou het graag zijn? De Predictor Ovatietest zegt u welke de 2 vruchtbaarste dagen in uw cyclus zijn. Noch nicht schwanger, aber Sie wären es gern? Der Predictor Ovationstest zeigt Ihnen die 2 fruchtbarsten Tage Ihres Zyklus an.

📖 Lire la notice dans son intégralité avant utilisation. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u de test uitvoert. / Lesen Sie den Beipackzettel vor der Verwendung vollständig durch.

📦 LOT Numéro de Lot / Lotnummer / Chargennummer



A utiliser avant la date d'expiration, imprimée sur la boîte. Gebruiken voor de uiterste houdbaarheidsdatum, weergegeven op de buitenverpakking. / Vor Ablauf des auf der Schachtel gedruckten Haltbarkeitsdatums verwenden.

Dispositif médical de diagnostic in-vitro. Medisch hulpmiddel voor in-vitro-diagnostiek. Medizinische In-vitro-Diagnosevorrichtung.